

スマートフォンと補聴器を繋げてもっと便利に！

アプリのインストール方法

スマートフォンには主に2種類あります。1つはアップル社のアイフォーン (iPhone) です。もう1つがアンドロイドと呼ばれるもので様々なメーカーから出ています。アイフォーンとアンドロイドでアプリのインストール方法が異なりますので、お持ちのスマートフォンがどちらかお確かめください。

今回はオーティコンのアプリ (Oticon On) をスマートフォンに入れる方法を紹介します。

目次

1、まずスマートフォンにアプリをインストールします。	1
▶アンドロイド (Android) の場合	1
▶iPhone の場合	2
2、次に、スマートフォンと補聴器をペアリングします。	3
スマートフォンと補聴器をペアリングする方法	3
3、接続できない場合	4
スマートフォン本体と補聴器を Bluetooth 接続する方法	5

1、まずスマートフォンにアプリをインストールします。

▶アンドロイド (Android) の場合

Google Play ストアからアプリをインストールします。

- ① Google Play ストアを立ち上げます。
- ② 検索窓にオーティコンと入力し検索します。
- ③ オーティコンのアプリが出てきます。
- ④ インストールを押すとアプリがスマートフォンに入ります。

⑤

1




2



3



4

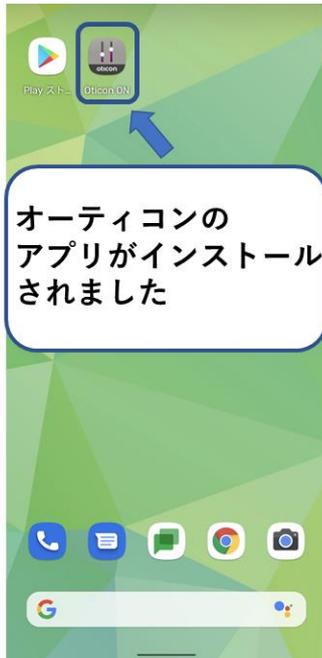

▶ iPhone の場合

App Store からアプリをインストールします。

- ① App Store を立ち上げます。
- ② 検索窓にオーティコンと入力し検索します。
- ③ オーティコンのアプリが出てきます。
- ④ インストールを押すとアプリがスマートフォンに入ります。

2、次に、スマートフォンと補聴器をペアリングします。

スマートフォンと補聴器をペアリングする方法

- ① Oticon On を立ち上げます。
- ② 補聴器の電源を入れる、または再起動します（充電器に一度入れてもう一度取り出すか、補聴器本体の下のボタンを長押しする）。
- ③ ペアリングする補聴器を選択したら「ペアリング」を押します。
- ④ 「続行する」を押したらペアリング完了です。

1 Oticon On をタッチ

2 手順に従って設定します（この画面が出ない場合もあります）

3 アプリが立ち上がったら補聴器の電源を入れるか再起動してください（充電器に一度入れてもう一度取り出すか、補聴器本体の下のボタンを長押しする）

4 ①ペアリングする補聴器を選択
②ペアリングをタッチ

5 準備ができるまで待ちます

6 続行するをタッチしたら完了です

7



3、接続できない場合

- 方法1. 立ち上がっているアプリを全て消して、もう一度アプリを立ち上げる。
- 方法2. スマートフォンを再起動してもう一度アプリを立ち上げる
- 方法3. スマートフォン本体と補聴器を Bluetooth 接続する→次ページの説明へ



スマートフォン本体と補聴器を Bluetooth 接続する方法

- ① 設定画面を開く
- ② Bluetooth 接続設定画面を開く
- ③ 新しいデバイスとペア設定する
- ④ 補聴器を選択
- ⑤ ペアリング完了
- ⑥ その後もう一度アプリを立ち上げペアリングする

機種 Pixel4a Android バージョン 11 の場合（お使いのスマートフォンにより操作方法、表示が異なります。）

1 歯車アイコンをタッチして設定画面を開きます → 2 へ

1 または Bluetooth アイコンを長押し → 3 へ

2 接続済みのデバイスをタッチ

3 接続の設定をタッチ


4 Bluetooth をタッチ

5 新しいデバイスとペア設定するをタッチ

6



7

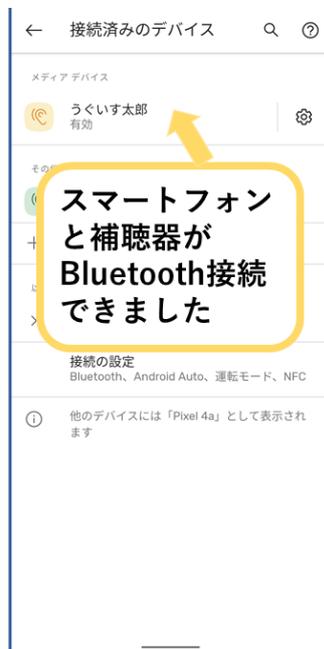

8

